

新コンセプト・アイアシストレンズ


BELUNA REST

ベルーナ レスト シリーズ

毎日頑張るあなたの目に、
アイアシストレンズで
心地よい休息を。



両面アイアシスト”最適化”設計「レストW」

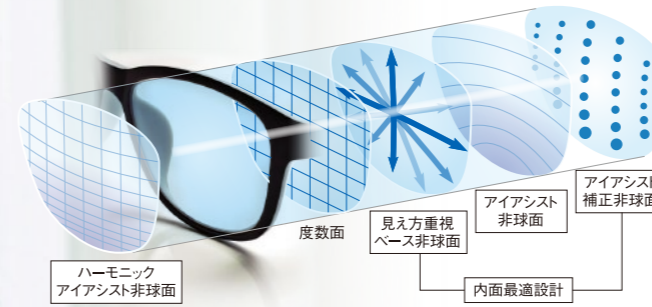

■ハーモニックアイアシスト非球面

上下の視線移動をなめらかにして自然な見やすさを向上。

■見え方重視ベース非球面

収差改善を最優先してゆがみやボケが極めて少ないクリアな視界を実現。

内面最適設計（オーダーメイド非球面）

受注後、レンズの度数・カーブ・厚さ・サイズを考慮し、理想的な非球面設計をレンズ内面に施します。


目の調節力を補う、新しい常用レンズ。




■アイアシスト非球面設計

視線移動に伴う、瞳の動きを考慮した右眼用・左眼用別の設計。非球面量を左右非対称にすることで、より快適な視界を実現しています。

■遠方視⇔近方視での視線

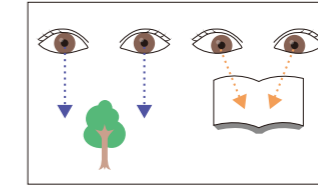


■左右非対称の非球面

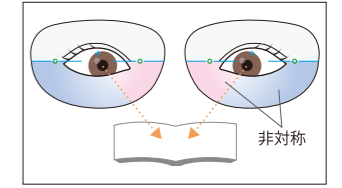

近くを見るときに、瞳は下方・内方に寄ります。近方視時の両眼視を考慮した設計です。

目の調節力を補う「アシストエリア」

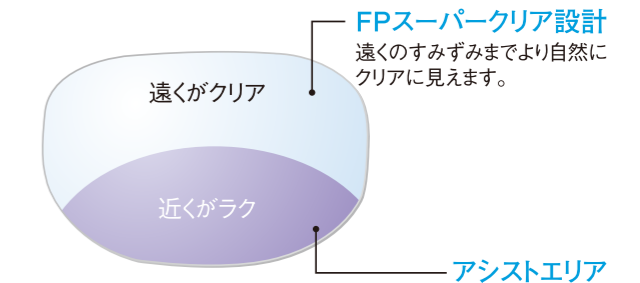

あなたのスタイルに合わせて選べます。



タイプA

日常生活全般で快適にお使いいただけるよう、より自然な視界を考慮したタイプ。

タイプB

パソコンやデスクワークなど近くを長時間見る方に最適なタイプ。

タイプC

パソコンやスマートフォンなどの使用で、見づらさやピントが合いにくいと感じる方にオススメのタイプ。

タイプD

ディスプレイ画面をメガネを外して見ることが多くなった方が快適に見えるタイプ。

■商品ラインアップ



品名	ベルーナレストW ダブル	ベルーナレストR リア	ベルーナレストS シングル
設計	両面アイアシスト非球面	内面アイアシスト非球面	アイアシスト非球面
スペック	外面 ハーモニックアイアシスト非球面		アイアシスト非球面 アシストエリア
	内面 アイアシスト非球面 アシストエリア FPスーパークリア設計 内面最適設計 (オーダーメイド非球面)	アイアシスト非球面 アシストエリア FPスーパークリア設計 内面最適設計 (オーダーメイド非球面)	
アシストパワー (最大)	タイプA +0.50D タイプB +0.75D タイプC +1.00D タイプD +1.25D	タイプA +0.50D タイプB +0.75D タイプC +1.00D タイプD +1.25D	+0.75D
度数変化帯	13mm	13mm	15mm
推奨天地幅 (EP以下)	26mm以上 (16mm以上)	26mm以上 (16mm以上)	28mm以上 (18mm以上)